

HOZAN

製品情報

L-711-2

偏光フィルター (L-711用)



4962772475751

MADE IN JAPAN



| | |
|-----|-------------------------------|
| 入組品 | フィルター、 プッシュリベット4本 (内1本は予備) |
|-----|-------------------------------|


レンズ側にも偏光フィルターが必要です。
【別売】L-815-1 偏光フィルター (L-815用)

ランプ部への取り付け方・取り外し方

フィルター両面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

ランプ部を仰向けにし、フィルターを落とし込みます。

付属のプッシュリベットを強く押し込みます (グロメット部を先に押し込むと容易です)。このとき、フィルターとのすき間が生じないように、グロメット脚部が上下に広がる向きに設置してください。

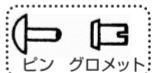

グロメット脚部が
上下に広がる



交換のため外すときはグロメットを完全に抜いてしまわず、シェード内側の面程度にしておくと、スムーズに作業できます。

グロメットは残す ← この面まで抜く



ご使用方法

- 1 照明側、レンズ側にそれぞれ偏光フィルターを取り付けます（レンズ側の偏光フィルター取り付け方法は、L-815-1の製品情報を参照）。
- 2 レンズ側の偏光フィルターのローレット部分に指をかけて回転させ、最も観察しやすいところを求めます。
本製品の偏光方向とレンズ側の偏光方向が 90° のとき、効果が最大になります。
※ 反射やギラつきを完全に防げるものではありません。
※ 観察対象物により、効果が薄い場合もあります。

⚠ 注意

長時間の使用により、反りが生じる場合があります。
機能上は問題ありません。

お手入れ方法

指紋や油類の汚れはIPAなどを柔らかい布にわずかに含ませて、軽くふき取ります。