

# L-KIT709/710/711

## マイクロ스코ープ (PC用)

本セットには、下記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

### 【明細表】

#### L-KIT709

L-837	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-50-2	レンズフィルター※

※L-870 ズームレンズに同梱されています。

#### L-KIT710

L-837	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-50-2	レンズフィルター※1
L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※2

※1 L-870 ズームレンズに同梱されています。

※2 L-703 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT711

L-837	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-50-2	レンズフィルター※
L-718	LEDライト

※L-870 ズームレンズに同梱されています。


### 【各種照明】



L-703

L-703-1



L-718

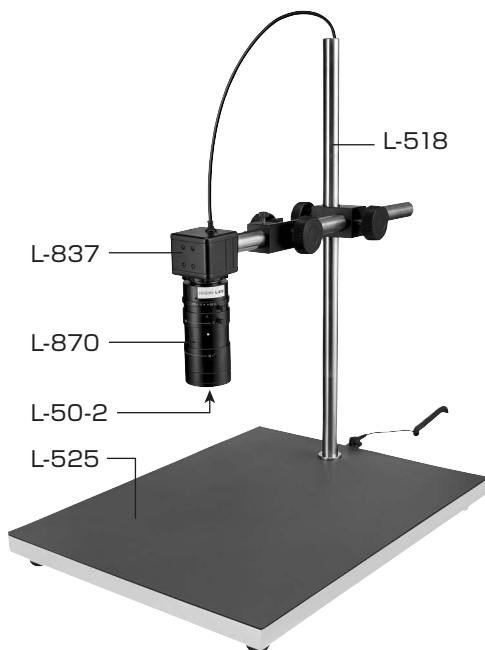

## 組み立て方法

### 1 ベースの組み立て

右図のようにベースを組み立てます。  
導電性カラーマットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。

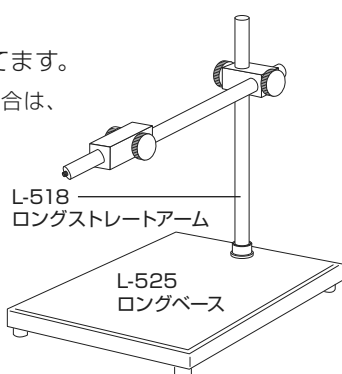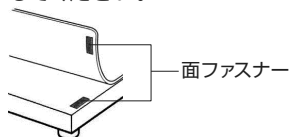


L-518  
ロングストレートアーム

L-525  
ロングベース

### 3 カメラの取り付け

ホルダーアーム先端のカメラネジにカメラを取り付けます。  
※ホルダーアームを完全に取り外すとカメラを取り付けやすくなります。

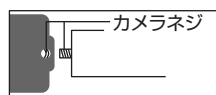

### 2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



L-837  
USBカメラ

L-870  
ズームレンズ

### 4 照明の取り付け

照明を取り付けます。  
照明の取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

### 技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

マイクロ스코ープの選定をサポート

**zoom & focus**



Zoom & Focus 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

補修部品についてもWebサイト上でご購入いただけます。

ホーサン ○-○○(製品の品番) 検索